




Nuovo sistema di cartucce



COOOO SÌ ADESIVO È MUCOPREN® SOFT

RIBASATURA MORBIDA

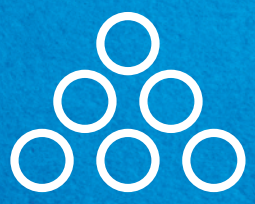

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Ribasatura di protesi

Mucopren® Soft è un materiale per la ribasatura morbida permanente a lungo termine a base di silicone A per l'uso diretto o indiretto.



Particolare adesione durevole:

Eccellente fissaggio adesivo per protesi in resina grazie a Mucopren® adesivo brevettato

Sigillatura esclusiva grazie alla superficie in silicone liscia e idrofoba:

Impedisce la proliferazione batterica garantendo in tal modo condizioni igieniche nella protesi¹⁾



Semplice manipolazione e rapida lavorazione

I moderni tempi di presa e i brevi tempi di pausa garantiscono una routine rapida e perfetta nello studio e nel laboratorio.

Favorisce il processo di guarigione in caso di impianti

Indicato anche per l'uso in implantologia per la perfetta osteointegrazione.



Comfort elevato

La morbida ribasatura è completamente inodore e insapore e consente di indossare la protesi nel modo più piacevole possibile.

MANTIENE LE PROMESSE



ULTERIORI INDICAZIONI



- Per realizzare **ribasature che rimangono sempre morbide**
- Per scaricare zone interessate da interventi **implantochirurgici**
- Per compensare aree della mucosa a differente resilienza
- Per scaricare margini ossei a spigoli vivi
- Per ribasare **protesi provvisorie**
- Come **condizionatore della mucosa** in caso di stomatiti provocate da protesi
- Per la realizzazione e la ribasatura di **otturazioni**

Vantaggi dell'applicazione grazie al nuovo adesivo²⁾



STUDIO

3 MIN

È possibile continuare a lavorare la protesi dopo soli **3 minuti** di pausa dopo la rimozione dal cavo orale.



LABORATORIO

3 MIN

Il tempo di pausa si riduce ancora a soli **3 minuti** nella pentola a pressione o nel bagno d'acqua.

» **1 sola**
APPLICAZIONE
NECESSARIA



¹⁾ Risultato di studi in-vitro in cui è stata dimostrata la possibilità di impedire la crescita di *Candida albicans* grazie alla superficie liscia in silicone

²⁾ Si riferisce alla versione ottimizzata del prodotto adesivo Mucopren®, introdotta per la prima volta nel 2023.

MUCOPREN® SOFT – ASSORTIMENTO



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Basic Set

REF 28105

50 ml Mucopren® Soft, 50 ml Mucopren® silicone sealant, 10 ml Mucopren® Adhesive, 6 puntali di miscelazione bianco, 16 puntali di miscelazione arancio, 1 porta pennelli, 20 pennelli monouso, 1 fresa in acciaio, accessori

Mucopren® Soft Normal pack

REF 15687

2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 puntali di miscelazione bianco

Mucopren® silicone sealant

REF 15686

50 ml Mucopren® silicone sealant, 8 puntali di miscelazione arancio

Mucopren® Adhesive

REF 14203

10 ml Mucopren® Adhesive



Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di lavorazione a 23°C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35°C ≥	Bagno d'acqua	Tempo di presa totale ≥	Durezza Shore (ca.)
Mucopren® Soft – ribasatura diretta	1:1	02:15 min	03:15 min	Non pertinente	5:30 min*	A 28
Mucopren® Soft – ribasatura indiretta	1:1	02:15 min	Non pertinente	03:00 min	> 3 min	A 28
Mucopren® silicone sealant	1:1	01:30 min	Non pertinente	Non pertinente	6:30 min a 23°C	A 33


*Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

APPUNTI

Kettenbach GmbH & Co. KG
 Im Heerfeld 7
 35713 Eschenburg · Germany
 Telefon +49 (0)2774 7050
 info@kettenbach.com
 www.kettenbach-dental.com



062797_0225

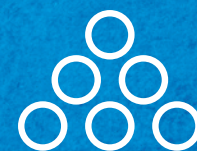

KETTENBACHDENTAL
 Simply intelligent